



• Pestaña de apertura despegable.

• Pestaña adhesiva en la parte posterior para colgarla con fiabilidad.

• Activación instantánea: incluye su propia solución salina estéril, una ligera presión y está lista para usar.

• Agarre ergonómico ajustable para un mejor agarre y control sin necesidad de tocar el tubo de la sonda.

Fabricado sin PVC, plastificantes ni látex.




Todas las sondas LoFric están revestidas con la exclusiva Tecnología de Superficie Urotonic™. Esto garantiza que la sonda se mantenga cómoda y segura, tanto durante la inserción como en la retirada.

• Orificios suaves.



Se puede plegar para guardarla discretamente en el bolsillo.

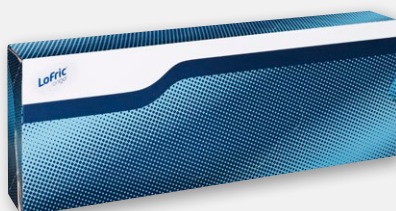

Caja para el cliente fácil de usar.

### Indicaciones

La sonda/el catéter vesical de un solo uso LoFric® Origo™ está indicada/o para el sondaje vesical intermitente.

### Esterilización y vida útil

Todas las sondas se esterilizan por radiación. El periodo de vida útil se encuentra impreso en el envase.

### Envase

30 sondas por caja y 4 cajas por caja de envío.

### Composición del material

**Revestimiento de superficie hidrofílica:** polivinilpirrolidona (PVP).

**Sonda:** elastómero a base de poliolefina (POBE).

**Bolsa humectante:** lámina de tereftalato de polietileno (PET), aluminio y polietileno (PE). Agua estéril con cloruro sódico (NaCl).

**Envase único:** lámina superior: lámina de tereftalato de polietileno (PET) y polietileno (PE). Lámina inferior: poliolefina.

### Línea de productos

Código	Tipo	Longitud	Tamaño
442 08 86	LoFric® Origo™ Nelaton	30 cm	CH 08
442 10 86	LoFric® Origo™ Nelaton	30 cm	CH 10
442 12 86	LoFric® Origo™ Nelaton	30 cm	CH 12
443 10 86	LoFric® Origo™ Nelaton	40 cm	CH 10
443 12 86	LoFric® Origo™ Nelaton	40 cm	CH 12
443 14 86	LoFric® Origo™ Nelaton	40 cm	CH 14
443 16 86	LoFric® Origo™ Nelaton	40 cm	CH 16
443 18 86	LoFric® Origo™ Nelaton	40 cm	CH 18
444 10 86	LoFric® Origo™ Tiemann	40 cm	CH 10
444 12 86	LoFric® Origo™ Tiemann	40 cm	CH 12
444 14 86	LoFric® Origo™ Tiemann	40 cm	CH 14
444 16 86	LoFric® Origo™ Tiemann	40 cm	CH 16
444 18 86	LoFric® Origo™ Tiemann	40 cm	CH 18

**LoFric® Origo™**


## Instrucciones

### Información importante


Asegúrese de que se proporciona al usuario una formación adecuada sobre el procedimiento de sondaje.

Lávese las manos con agua y jabón.


Es un producto de un solo uso. Una vez utilizado, el revestimiento de la superficie se deteriorará y la sonda dejará de ser estéril. Use solo la solución salina incluida para humedecer la sonda.

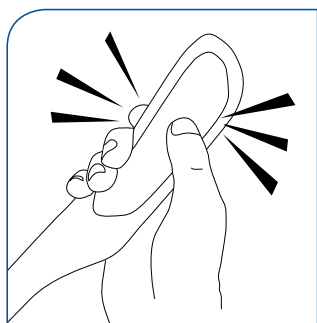


1. Apriete para que salga la solución salina y la sonda está lista para utilizar.

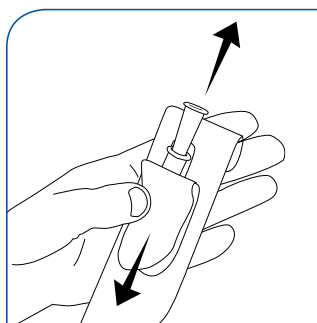

2. Tire de la pestaña hacia abajo para abrir el envase.

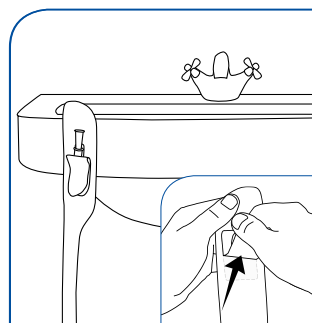


3. Use la pestaña adhesiva de la parte posterior para colgar el producto si es necesario.

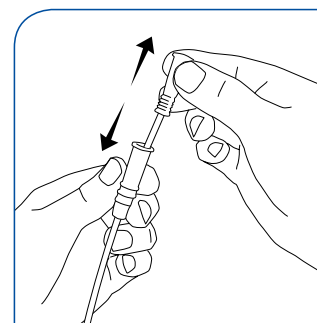

4. Estire la guía de inserción y ajústela debajo del conector para controlar la inserción sin necesidad de tocar el tubo de la sonda.

## Opciones

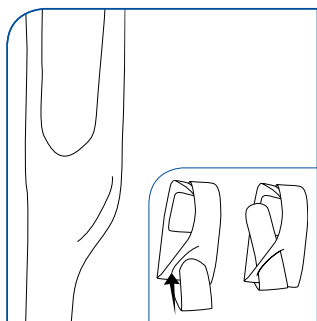

A. Doble el envase y utilice la apertura para mantener la sonda doblada.

### Distribuidor en Argentina:

Droguería Luma SA.

Dirección: Pringles 2707,  
CP 1678 Caseros - Buenos Aires, Argentina

Teléfono/Fax: (5411) 4734-7174 / 7175

[info@droguerialuma.com.ar](mailto:info@droguerialuma.com.ar), [www.droguerialuma.com.ar](http://www.droguerialuma.com.ar)